



Lépcsőzetes állítható magasságú járókeret 4 fogantyúval

RP747

Használati utasítás



I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelte alapján (2017 április 5)

1. KÓD

RP747 Összecsukható sétáló, állítható magasságú dupla fogantyú

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Moretti S.p.A. MOPEDIA járgányát. Ez a használati útmutató néhány javaslatot ad az Ön által kiválasztott termék helyes használatára, és értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Ha kérdése van, tanácsért és segítségért forduljon a viszonteladóhoz.

3. RENDELTETÉS

A Mopedia by Moretti sétányok két karral használható eszközök, mozgási nehézségekkel küzdők számára készültek.



FIGYELEM!

- **Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben;**
- **A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért;**
- **A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.**

4. EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. a saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott és a cukornád kategóriájába tartozó termékek megfelelnek a (EU) 2017/745 orvostechnikai eszközökről szóló irányelvben és a további módosításokban meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek. Ebből a célból a Moretti S.p.A. az alábbiak szerint garanciát vállal és kijelenti, saját maga szerinti felelősség:

1. A kérdéses eszközök megfelelnek a (EU) 2017/745 irányelv I. mellékletében foglalt alapvető követelményeknek, amint azt a fenti irányelv VII. melléklete előírja;
2. A szóban forgó készülékek **NEM MÉRŐESZKÖZÖK**;
3. A szóban forgó eszközöket **NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATRA**
4. A kérdéses eszközöket **NEM STERIL** csomagolásban értékesítik;
5. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni;
6. **NE** használja/telepítse a kérdéses eszközöket a Moretti S.p.A. által kifejezetten megjelölt célra;

7. A Moretti S.p.A. karbantartja és benyújtja a 2017/745 irányelvnek való megfelelést igazoló dokumentációt a megfelelő hatóságokhoz és a további módosításokat.

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék használata előtt OLVASSA EL figyelmesen a teljes kézikönyvet;
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a járóka helyes beállításának és helyes használatának meghatározásához;
- Győződjön meg arról, hogy a terméket hiánytalanul szállítja, és tartsa hőforrásoktól távol;
- HASZNÁLATI ÉRTÉK – a készülék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg;
- NE engedje, hogy gyerekek játsszanak vagy kezeljék a készüléket.

6. SZIMBÓLUMOK



Termék szám



Egyedi eszközazonosító



CE jelölés



Gyártó



Tétel szám



Olvassa el a használati utasítást



Orvosi eszköz



Ártalmatlanítási feltételek



Ártalmatlanítása

7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A MOPEDIA járók könnyű eloxált alumínium csőből készülnek, párnázottan. fogantyúk, csúszásmentes gumihegyek és/vagy forgatható görgők és/vagy rögzített görgők. 2,5 cm-enként állítható magasságúak. Ezek az eszközök megkönnyítik az emberek mozgását korlátozott statikus egyensúly mellett és/vagy dinamikusan, növelve az amplitúdót a támasztó alapra. Támogatást nyújtanak az alsó végtagok gyengesége és/vagy bénulása esetén. Segít letölteni a karokra a személy súlyának részét, ahol az egyik vagy mindkét alsó végtag terhelésének korlátozása szükséges.



7.1 A magasság beállítása

A magasság beállításához nyomja meg a nyomógombot, és csúsztassa a botot a kívánt magasságba. Győződjön meg arról, hogy a nyomógomb teljesen kinyúlt a kívánt lyukon, amikor végzett. Ismétlje meg a leírt eljárást minden lábra, a végén ellenőrizze, hogy mind a négy láb magassága azonos.

8. HASZNÁLAT ELŐTT

- Mindig ellenőrizze, hogy a fékek működnek-e a sétakocsi használata előtt, ha van ilyen;
- Ne használja a járdát, ha az sérült vagy hibásan működik, kérjük lépjen kapcsolatba a viszonteladóval a javítás érdekében;
- Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e az emberek és tárgyak biztonságos használatának garانتálása érdekében;
- A felhasználóknak gyalogos utakon kell közlekedniük, nem pedig forgalmas utakon;
- Ügyeljen a becsípődésből eredő sérülés lehetőségére; ne helyezze ujjait a sétáló mozgó részei közé. Ügyeljen a sétáló bezárására és kinyitására.

9. HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az eszköz nagyobb stabilitást, támogatást és biztonságot nyújt mozgás közben. Mindenesetre nem használhatják azok, akiknek a kéz és/vagy a karja láthatóan gyenge, de még az egyensúlyi problémákkal küzdők sem. A járóka kívül és belül egyaránt használható. Csak olyan felületeken javasoljuk a használatát, amelyeken mind a négy láb érinti a talajt. Ne használja sziklás terepen vagy lejtős felületeken, mert a járólap instabillá válhat. A készüléket nem személyek vagy egyéb anyagok szállítására tervezték

- Legyen fokozott óvatosság nedves és csúszós felületeken;
- NE használja olyan betegeknél, akiknek súlya meghaladja a termék címkéjén és a jelen kézikönyv műszaki jellemzői című fejezetében feltüntetett súlyt;
- Kerülje a 10 foknál nagyobb lejtőn történő használatot, és forduljon meg emelkedőn vagy lejtőn a fogyatékkal élőket kezelőnek kell segítenie.
- Ne hagyja, hogy a készülék hosszú ideig vízzel érintkezzen;
- Rendszeresen ellenőrizze a szilárdságát, a stabilitást és a gumicsúcsok jó állapotát.

Ha elhasználódtak, cserélje ki őket;

- Ha kétségei vannak a használattal, beállítással vagy karbantartással kapcsolatban, forduljon a forgalmazóhoz;
- A lehetséges kockázatok elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől;

11. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

Megjegyzés: Olvassa el a jelen kézikönyv biztonsági utasításait. Használja a sétálót járást segítő eszközként.

Ehhez használja a két fogantyút és tolja előre a segédeszközt, így kényelmes és megbízható támaszt kap a gyalogláshoz.



Lefelé nyújtott karral a fogantyúknak a csukló magasságában kell lenniük. Ha a kezét a markolatra helyezi, a könyökét 20°-30°-kal meg kell hajlítani.



FIGYELEM! • Ügyeljen az elektromos vezetékek, nedves felületek, szőnyegek, játékok vagy törmelék, bútorok, kis lépcsők és rések a padlón. Ne használja a sétálót lépcsőn vagy mozgólépcsőn.



1. Ha a beteget a toloszékből a sétálóra szeretné helyezni, győződjön meg arról, hogy a kerekesszék és a sétakocsi görgői le vannak zárva.



FIGYELEM!
• Az áthelyezéshez és az első lépésekhez kérjen segítséget a kezelőtől.



2. a) Sétálók tippekkel: sétáláshoz emelje fel, és helyezze kényelmesen maga elé, ügyelve arra, hogy mind a négy lába a padlón legyen. Sétáljon óvatosan, lépésről lépésre.

b) Görgős járók: a járáshoz tolja kényelmesen maga elé, ügyelve arra, hogy mind a négy lába még a görgősnek is a padlón legyen. Sétáljon óvatosan, lépésről lépésre.

Megjegyzés: A Walkert mindig a fogantyúknál kell megfogni.



Ne tolja túl messzire a Walkert a testétől. Ez elesést és nem megfelelő terhelést okozhat.

12. KARBANTARTÁS

A MORETTI Mopedia készülékeit gondosan ellenőrzik, és a piacra kerülést követően EC-jelöléssel látják el. A betegek és az orvosok biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a készüléket két évente ellenőriztesse a gyártóval vagy az erre felhatalmazott laboratóriummal. Az időszakos ellenőrzés alatt a következő részek vizsgálatát értjük:

- A járókeret és a csatlakozó alkatrészek;
- Ellenőrizze a görgők rögzítését és működését a fékével;
- Ellenőrizze az összes hegesztési pontot;
- Ellenőrizze a hegyek kopását, ha vannak;

Javításkor csak jóváhagyott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni.

13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

13.1 Tisztítás

A por eltávolításához csak nedves ruhát használjon, a nehezebb szennyeződések eltávolításához pedig enyhe szappanos nedves ruhát használjon. Használat előtt alaposan szárítsa meg. Soha ne használjon 30°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet. Soha ne használjon vízszugár- vagy gőzmosógépet.

13.2 Fertőtlenítés

Ha fertőtlenítenie kell a készüléket, használjon szokásos fertőtlenítő tisztítószert.

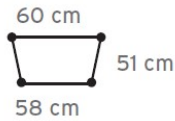
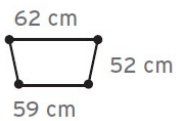
Megjegyzés: Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket, például acetont.

14. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTEL

A készülék ártalmatlanítása esetén ne használja a közös kommunális hulladékgyűjtő edényt.

Javasoljuk, hogy a készüléket a megfelelő hulladékgyűjtő helyre dobja újrahasznosítás céljából.

15. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kód	Max felhasználási súly	2,5 cm-enként állítható magasság	Végek/görgők	Alap*	Alap**
RP747	130 kg	71-89 cm között	4 gumi vég		

16. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított (két) 2 éves garanciát vállalunk az anyag- vagy gyártási hibákra, az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások mellett. A jótállás nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából, visszaéléséből vagy módosításából eredő károkra, a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes.

A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A Moretti nem vállal felelősséget a személyi sérülésből vagy a helytelen telepítésből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő vagy más módon okozott károkért. Moretti A Moretti nem vállal garanciát a termékekre a sérülésekre

vagy hibák a következő körülmények között: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő károk (ha van) nem a Moretti által szállított alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítási sérülés (az eredeti szállítástól eltérő Moretti), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak.

17.2 A garancia nem terjed ki a javításra

A garancia hatálya alá nem tartozó terméket csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye után lehet javításra visszaküldeni. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások munka- és szállítási költségei teljes mértékben a vásárlót vagy a kereskedőt terhelik. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékek javítására a termék javításának kézhezvételétől számított hat (6) hónapig terjedő garancia érvényes.

17.3 Nem hibás készülék

A vásárlót értesítjük, ha a visszaküldött termék megvizsgálása és tesztelése után a Moretti azt állítja, hogy a termék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vásárló fizeti.

18. ALKATRÉSZEK

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk.

19. MENTESÜLÉSEK

A jelen jótállásban kifejezetten meghatározott esetek kivételével és a törvény korlátain belül, a Moretti nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatóságos képviselést, garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértésekre és a jogsértésekre vonatkozó nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata zavartalan vagy hibamentes lesz. A törvény által előírt vélelmezett jótállás időtartama a jótállási időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozását, illetve a fogyasztóknak szánt termékekkel kapcsolatos véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását. Az ilyen államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás bizonyos felelősségkizárásai és korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11
www.morettispa.com email: info@morettispa.com
MADE IN P.R.C