

## Használati utasítás:

**REF** : 0811311

### FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ: KEREKESZÉK GYERMEKEKNEK „RAINBOW”

#### **RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:**

Ezt a kerekesszéket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték. Lehetővé teszi mozgássérült vagy mozgásukban korlátozott személyek szállítását, és a beteg maga (ha van 20-24"-os hátsó kerekei) vagy kísérő segítségével mozgásra használható. Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó keréssel és a keréken lévő kézi peremmel rendelkezik, a felhasználó önállóan mozoghat



#### **MŰSZAKI ADATOK:**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| KERET          | Acél - összecusukható                      |
| SZÍN           | Sárga-Narancs-Kék                          |
| ÜLÉS           | Szövet                                     |
| OLDALFAL       | Felhajtható                                |
| LÁBTARTÓ       | Levehető, állítható hosszúságú, forgatható |
| HÁTSÓ KEREKEK  | 20" Kompakt sugarakkal                     |
| ELÜLSŐ KEREKEK | 6" x 1" kompakt (150x25 mm)                |
| FÉKEK          | Hátsó kerekeken                            |

|         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0811311 | 36cm                                                                              | 36cm                                                                              | 33,5cm                                                                            | 38cm                                                                              | 53cm                                                                              | 103cm                                                                             | 84cm                                                                               | 46cm                                                                                | 20" 6"                                                                              | 80kg                                                                                | 17,9kg                                                                              |

## ÖSSZESZERELÉS

Lásd az A. MELLÉKLETET

## SZIMBÓLUMOK

Lásd a B. MELLÉKLETET

## ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtagok becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- A tolószékbe való leülés és felállás önállóan is végrehajtható, de erőt és mozgékonytságot igényel a felsőtesten.

## FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbáljon meg tárgyakhoz nyúlni, ha térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbáljon meg tárgyakhoz nyúlni, ha az ülésre kell mennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne használja a kerekesszéket olyan úton vagy felületen, ahol víz, jég vagy kenőanyag van.
- Ne használjon a MOBIAC által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.

### **HASZNÁLAT ELŐTT:**

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e a termék biztonságos használatának garantálása érdekében. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
6. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve.
7. Ellenőrizze a gumibroncsokat, a gumibroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékszárakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumibroncs és a kerékszárak között.

### **FIGYELMEZTETÉS!**

Az alábbi módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha nem tapasztalt, kérjen segítséget egy kísérőtől.

### **LEÜLÉS A KERESŐSZÉKHEZ:**

1. Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé.

### **FELÁLLÁS A KERESŐSZÉKBŐL:**

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Egyformán támaszkodnia kell mindkét fogantyúra. Csak az egyik kéz megtámasztása (és felügyelet nélkül) sérülést okozhat.
4. Helyezze a testsúlyt az áthelyezni kívánt ülésbe.

### **EGYÉB UTASÍTÁSOK:**

1. Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor két kísérő segítségével érheti el úti célját. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőtől:
3. Ezt a kerekesszéket kizárólag személy szállítására lehet használni az ülésen.
4. A felhasználók semmilyen közlekedési eszköz használata közben ne üljenek tolószékben.
5. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat, hogy üljön vagy felálljon, **FELKÜLÉS VESZÉLYE**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

### **KARBANTARTÁS:**

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszéke élettartamát és hatékonyságát.

## **HETI**

1. Ellenőrizze a keréknyomást a kereken lévő utasításokat követve. Ha pneumatikus kerekek vannak a kerekesszéken.
2. Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van-e.
3. Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
4. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ronggyal vagy speciális króm felületekre vagy festett felületekre alkalmas szerekkel.
5. Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be.
6. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

## **NEGYEDÉVENKÉNT**

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillákat, keréktengelyeket és a hátsó kerekek kézi felnijét.
2. Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
3. Győződjön meg arról, hogy minden anya és csavar meg van húzva, de nem túl szoros.
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

## **ÉVENTE**

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval.
2. A páciens biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

## **TISZTÍTÁS:**

A karbantartáson és ellenőrzésen túl a keret és a kárpit is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződések szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerrel.
- A bőrű kerekesszékeket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert.
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

## **VIGYÁZAT (!):**

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
- A MOBIAS S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIAS S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
- Van egy  $\pm 3\%$ . Eltérés a termékek méretétől.

## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy az már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

## **ESEMÉNY JELENTÉS:**

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

## **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:**

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

## **GARANCIA:**

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek. Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

## MELLÉKLET A. ÖSSZESZERELÉS

- A tolószék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló. Először is ellenőrizzük a csomag tartalmát.



- Nyitás: Fogja meg a fogantyúkat és húzza kifelé, majd nyomja le az ülés oldalán lévő rudakat, amíg a kerekesszék teljesen ki nem nyílik.

- Bezárás: Kövesse a fordított eljárást.


- Szerelje össze a lábtámaszt úgy, hogy az alkatrészen lévő zsanérlemezeket a kerekesszék vázán lévő csuklócsapokra szerelje. Nyomja a lábtámaszt a kerekesszék belseje felé, amíg a helyére nem kattán. Ismételve meg ugyanezt az eljárást a másik lábtartóval is.



- Távolítsa el a lábtartót a kioldókar megnyomásával, forgassa kifelé, emelje le a lábtámaszt a csuklópánt csapjairól.

### Billenés gátló rendszer


- A kerekesszékben van egy felborító rendszer, távolítsa el a kupakot a tolószék alján lévő csövekről.
- Helyezze be a billenés gátló kerekeket.
- Szerelje be a rögzítőcsapot a metsző furatokba. A folyamat

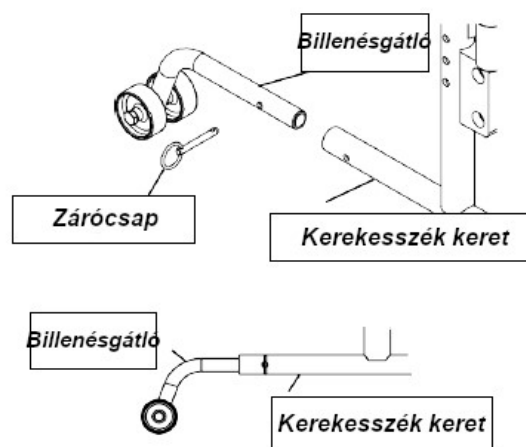

megfordításával eltávolíthatjuk a borulást elkerülő rendszert.



- A lehajtható kartámasz felemeléséhez nyomja meg a biztonsági kart, és húzza felfelé.

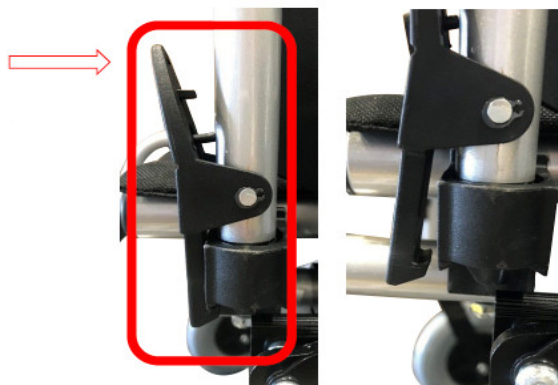

## B. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOK

A címkére, a főkartonra és/vagy a felhasználói kézikönyvre nyomtatott szimbólumok leírása



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termékszám



Olvassa el a használati utasítást



Sorozatszám



Ne használja, ha a csomag sérült



Tételszám



Helyes irány felfele



Egyedi eszközazonosító



Napfénytől távoltartandó



Szárazon tartani



Halmozási magasság



Óvatosan kezelje



Törékeny



Csak bel térben használható



Az elektromos és elektronikus  
berendezések hulladékairól szóló  
irányelv